

SCHRITT 1: Wählen Sie eine Stelle aus.

SCHRITT 2: Waschen Sie die Stelle mit Seife, trocknen Sie sie ab und reinigen Sie sie dann mit einem Alkoholtuch. Lassen Sie die Stelle an der Luft trocknen.

SCHRITT 3: Nehmen Sie die Kappe vom Sensorapplikator ab.

VORSICHT:

- Verwenden Sie die Packung NICHT, wenn sie beschädigt ist oder der Sicherungsaufkleber anzeigt, dass der Sensorapplikator bereits geöffnet wurde.
- NICHT die Verschlusskappe erneut aufsetzen, da hierdurch der Sensor beschädigt werden kann.
- NICHT in das Innere des Sensorapplikators fassen, da sich hier eine Nadel befindet.

SCHRITT 4: Platzieren Sie den Sensorapplikator über der Stelle. Drücken Sie den Sensorapplikator fest auf die Haut, um den Sensor anzubringen.

VORSICHT: Drücken Sie den Sensorapplikator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden.

SCHRITT 5: Ziehen Sie den Sensorapplikator vorsichtig vom Sensor ab.

SCHRITT 6: Vergewissern Sie sich, dass der Sensor fest sitzt. Entsorgen Sie den gebrauchten Sensorapplikator. Siehe Abschnitt *Entsorgung* im Benutzerhandbuch.

Zur Verwendung des Sensors siehe Benutzerhandbuch in der FreeStyle Libre 3 App. Falls Sie das Lesegerät verwenden, siehe das Benutzerhandbuch zum FreeStyle Libre 3 Lesegerätset. Die aktuellste Version jedes Benutzerhandbuchs ist verfügbar über www.FreeStyleLibre.com.

ÉTAPE 1 : Sélectionnez le site.

ÉTAPE 2 : Lavez le site avec du savon ordinaire, séchez-le, puis nettoyez avec une lingette imprégnée d'alcool. Laissez sécher le site.

ÉTAPE 3 : Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur.

MISE EN GARDE :

- Ne PAS utiliser si le dispositif est endommagé ou si l'étiquette d'inviolabilité indique que l'applicateur de capteur a déjà été ouvert.
- Ne PAS remettre le capuchon en place sous peine d'endommager le capteur.
- Ne PAS toucher l'intérieur de l'applicateur de capteur car il contient une aiguille.

ÉTAPE 4 : Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site. Appuyez fermement pour appliquer le capteur.

MISE EN GARDE : Ne pressez PAS l'applicateur de capteur avant de l'avoir placé au-dessus du site préparé pour éviter des résultats imprévus ou une lésion.

ÉTAPE 5 : Éloignez doucement l'applicateur de capteur.

ÉTAPE 6 : Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Éliminez l'applicateur de capteur usagé. Veuillez consulter la partie *Élimination* du manuel d'utilisation.

Pour utiliser votre capteur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation contenu dans l'application FreeStyle Libre 3. Si vous utilisez le lecteur, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation inclus dans le kit du lecteur FreeStyle Libre 3. La dernière version du Manuel d'utilisation est disponible à l'adresse www.FreeStyleLibre.com.

PASSAGGIO 1: Selezionare il sito.

PASSAGGIO 2: Lavare la sede di applicazione con sapone, asciugare, quindi pulire con una salvietta imbevuta di alcol. Attendere che l'area sia asciutta.

PASSAGGIO 3: Svitare il tappo dall'applicatore del sensore.

ATTENZIONE:

- NON utilizzare se è danneggiato o se l'etichetta antimissione indica che l'applicatore del sensore è già stato aperto.
- NON rimettere il tappo perché potrebbe danneggiare il sensore.
- NON toccare all'interno l'applicatore del sensore perché contiene un ago.

PASSAGGIO 4: Posizionare l'applicatore del sensore sul sito scelto. Premere fermamente per applicare il sensore.


ATTENZIONE: NON premere sull'applicatore del sensore fino a quando non sarà stato posizionato sul sito preparato per evitare risultati imprevisti o lesioni.

PASSAGGIO 5: Con delicatezza, allontanare l'applicatore del sensore dal sito.

PASSAGGIO 6: Assicurarsi che il sensore sia ben fissato. Rimuovere l'applicatore del sensore utilizzato. Vedere la sezione *Smaltimento* nel Manuale d'uso.

Per utilizzare il sensore, fare riferimento al Manuale d'uso nell'app FreeStyle Libre 3. Se si utilizza il lettore, fare riferimento al Manuale d'uso incluso nel kit del lettore FreeStyle Libre 3. L'ultima versione di tutti i Manuali dell'utente è disponibile sul sito www.FreeStyleLibre.com.


1

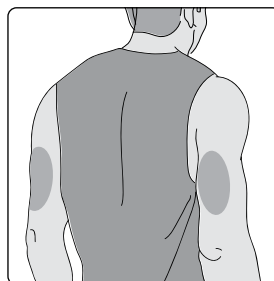


2




3

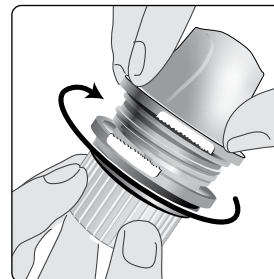

4

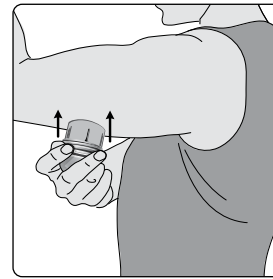

5

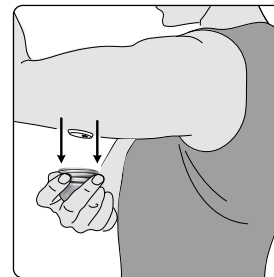

6



Hiermit erklärt Abbott Diabetes Care Ltd., dass der Funkanlagentyp FreeStyle Libre 3 Sensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.diabetescare.abbott/doc

Par les présentes, Abbott Diabetes Care Ltd. déclare que l'équipement radioélectrique du type capteur FreeStyle Libre 3 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.diabetescare.abbott/doc

Abbott Diabetes Care Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (sensore FreeStyle Libre 3) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.diabetescare.abbott/doc

Laden Sie die FreeStyle Libre 3 App herunter und folgen Sie den Schritten in der App, um den Sensor zu starten.



Téléchargez l'application FreeStyle Libre 3 et suivez les étapes pour démarrer votre capteur.



Scaricare l'app FreeStyle Libre 3 e seguire i passaggi nell'app per avviare il sensore.

